



Optosil® / Xantopren® Precisión todos los días.

Sistema para toma de impresión dental confiable y seguro.

Cada día usted tiene requerimientos diferentes en su trabajo. Nosotros los cumplimos proporcionando soluciones convenientes. La línea de productos Optosil® / Xantopren® por muchos años ha sido probada en consultorios dentales alrededor del mundo y marcó el estándar para todos los materiales de su clase.

El sistema Optosil® / Xantopren® es un material para tomar impresiones dentales que permite reproducir de manera precisa cada detalle y sin sensibilidad a los guantes de látex ni a agentes hemostáticos. Cuenta con "Hidrocontrol", esto facilita su aplicación aún en ambientes húmedos.

Salud bucal en las mejores manos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Optosil® Comfort Putty / Xantopren® – Todas las ventajas en un solo sistema.

El sistema Optosil® / Xantopren® es sencillo, seguro y rápido.


Tenemos diferentes productos disponibles, fabricados para cumplir todas sus necesidades.

- Optosil® Comfort, indicado para impresiones de dos pasos y tipo sándwich.
- Xantopren® L Blue de viscosidad baja para la técnica de dos pasos e impresiones tipo sándwich.
- Xantopren® M Mucosa, diseñado para impresiones en pacientes edéntulos. Para impresiones funcionales de las mucosas, impresiones pasivas e impresiones activas.

Es sistema Optosil® / Xantopren® cuenta con una alta estabilidad dimensional. Esto permite correr modelos incluso después de 7 días¹.

¹Fuente: Wöstmann B: Clinical parameters of impression techniques in dentistry, Z Stomal 93, 531-532, 1996.


Estabilidad dimensional de Optosil® Comfort contra silicona "A"

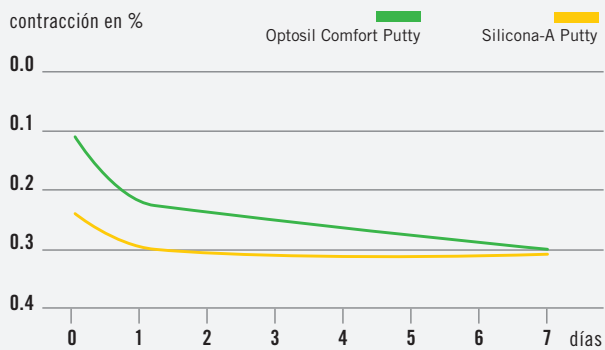

Un estudio in vitro demuestra que la precisión dimensional clínicamente relevante y la estabilidad de almacenamiento de Optosil® Comfort masilla en periodos clínicamente pertinentes de varios días es comparable con la de Siliconas tipo A.



Ángulo de contacto de Xantopren® después de mojar

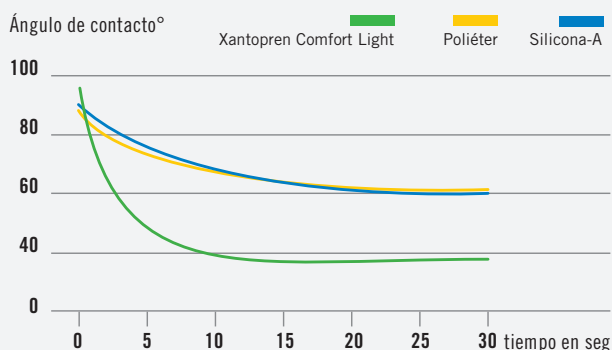

En un estudio in vitro, Xantopren® Comfort Light exhibió los mismos buenos resultados en ambiente húmedo como en ambiente seco.



Código:	Artículo:	Contenido:
66010202A	Optosil® Comfort	1 x 900 ml
66003721A	Xantopren® L Blue	1 x 140 ml
66007341A	Xantopren® M Mucosa	1 x 140 ml
66037448	Activador universal plus liquid	1 x 25 ml
66037447	Activador Universal Plus Paste	1 x 60 ml

Kulzer México S.A. de C.V.
Tel. (55) 5531-5549
Homero 527 int. 301-302
Polanco Reforma, Miguel Hidalgo
CP 11550, Ciudad de México

web: kulzer.mx
twitter: @kulzermexico
facebook: KulzerMexico
youtube: Kulzer Latinoamérica
contacto-hkxm@kulzer-dental.com